

Technische specificaties

Epi-Wet – Alarm bij vochtverlies:

Afmetingen: (L x H x B) 12,5 x 3,8 x 13,8 cm
Stroomvoorziening: 10 – 20VDC 50mA max.
Netadapter: Type 8311
Uitgang: Potentiaalvrij relaiscontact max. 24V 1A in het contact

Sensorlaken:

Afmetingen: 140 x 70 cm
Gevoeligheidsopp.: Ong. 65 x 65 cm.
Levensduur:Aanbevolen: Twee lakens voor een behandelingsperiode.

Accessoires:

Draadloze alarm
Pieper
Dialer - telefoonoproep



Manuf. Danish Care Technology ApS
Energivej 3 · DK-4180 Sorø · Denmark



Dealer:

QuoVadis

QuoVadis Nederland BV

Postbus 171 – NL - 3740 AD Baarn
Telf. 035-5488701 · Fax. 035-5421358
Web: www.qvn.nl · E-mail: info@qvn.nl

**Danish Care
Technology ApS**

Energivej 3 · DK-4180 Sorø
Tlf.: +45 5850 0565 · Fax: +45 4696 4646
E-mail: info@danishcare.dk · Web: www.danishcare.dk


File no. EPI-WET NL Rev.7-02

Handleiding

EPI-WET

Alarm bij vochtverlies

(bij urineverlies, braken, bloedtransfusie, nierdialyse, etc.)

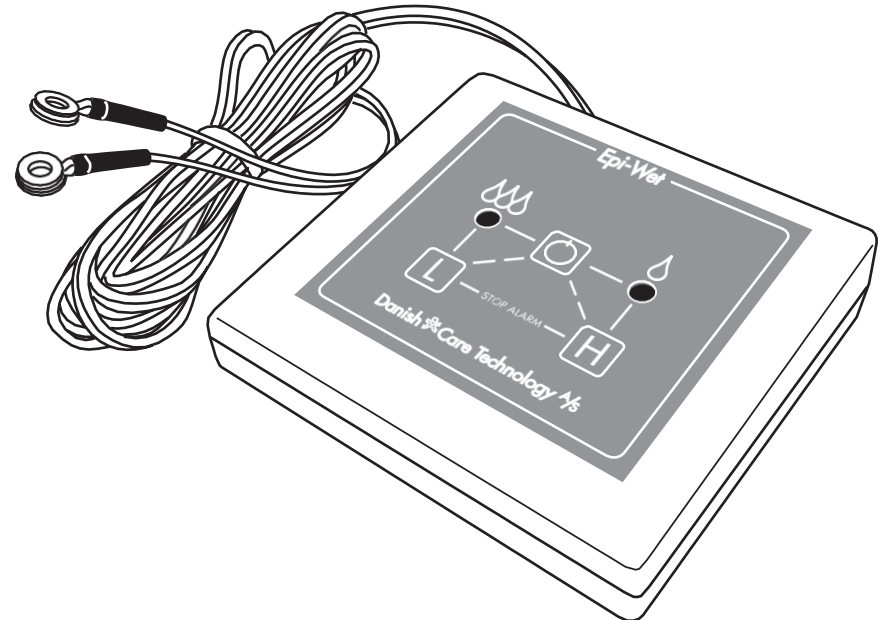

QuoVadis


www.qvn.nl

Oproepapparaat met pieper



Dit apparaat wordt gebruikt in situaties waarbij de afstand tussen Epi-Wet en de persoon die opgeroepen dient te worden groter is dan 500 meter.

De pieper geeft een alarm af in de vorm van geluid of trillingen. De pieper is geschikt voor gebruik in een woongroep, instelling of ziekenhuis met nachtploegen, alsmede in een woning, indien de ouders zich op meer dan ong. 25 meter van de epilepsiepatiënt bevinden.

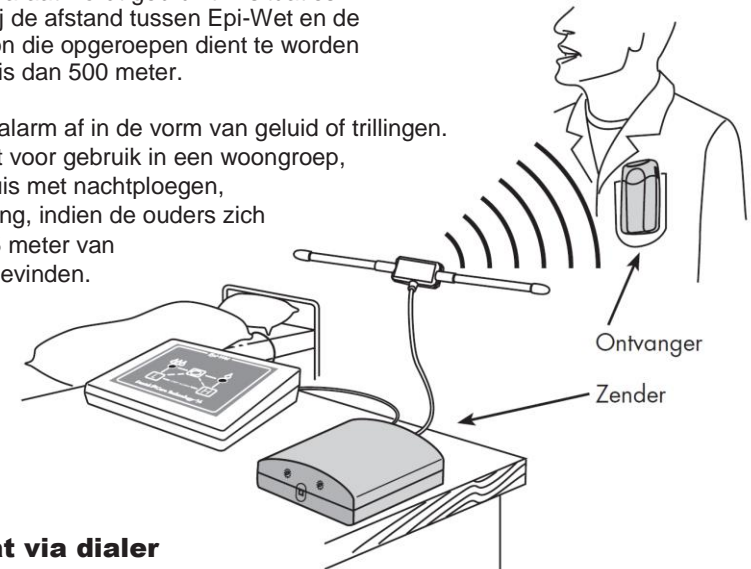

Oproepapparaat via dialer



Dit apparaat wordt gebruikt om de persoon of personen die opgeroepen dienen te worden volledige vrijheid te geven. kan een bericht van 12 seconden ingesproken worden. Dit bericht wordt naar 2 vooraf gekozen telefoonnummers doorgestuurd.

Het oproepapparaat belt één voor één naar de beide telefoonnummers, totdat een persoon het alarm afzet door op z'n #-toets te drukken. Indien het alarm niet wordt uitgezet, zal het oproepapparaat 10 keer naar beide nummers bellen (conform de wet op de automatische oproepen). Indien het gebelde nummer in gesprek is, wordt er automatisch naar het volgende nummer gebeld, en later wordt het nogmaals geprobeerd.



Accessoires


Op de Epi-Care en Epi-Wet dient oproepapparatuur aangesloten te worden. Afhankelijk van de gewenste zendafstand en de gebruikssituatie zijn er de volgende opties.

Draadloze alarmklok



De draadloze klok bestaat uit een zender, die wordt aangesloten op Epi-Wet en een ontvanger (klok) die in het stopcontact wordt geplaatst op de locatie waar men de oproep wenst te ontvangen. Bij een alarm ontvangt de klok het signaal van de zender en belt, totdat het alarm op Epi-Wet wordt uitgezet.

Het bereik van de Epi-Wet tot de klok is ong. 25 meter. Indien u een groter bereik wenst, kunnen wij u aanbevelen een oplossing te vinden met een pieper of telefoon.

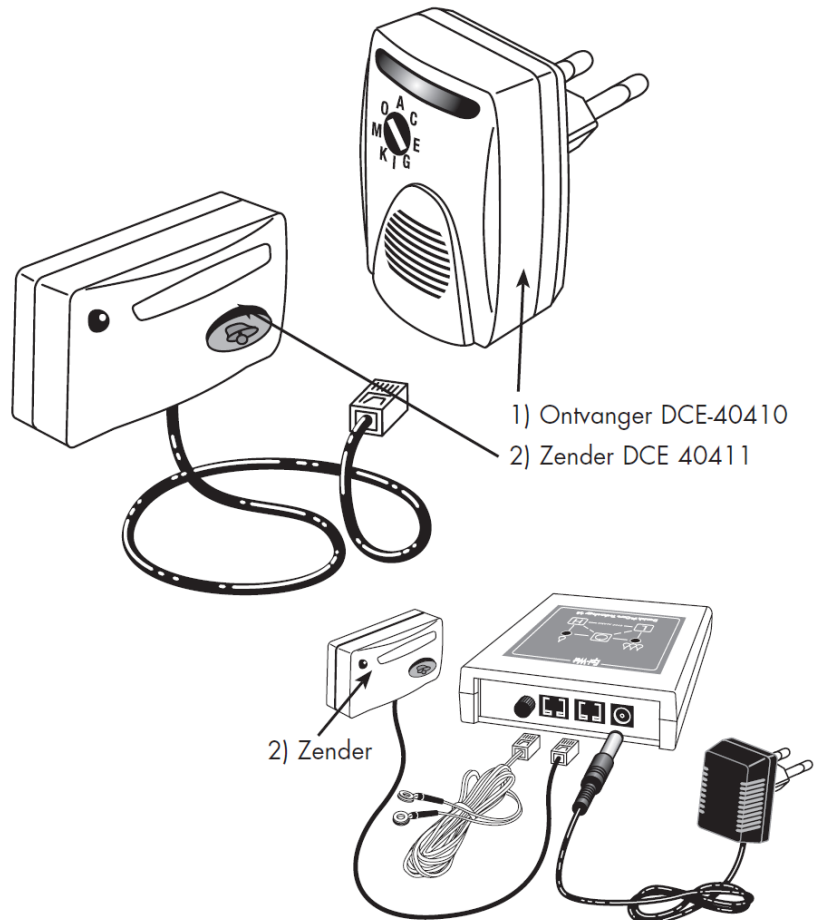


- 1) Ontvanger DCE-40410
- 2) Zender DCE 40411

2) Zender

6

Inhoud:

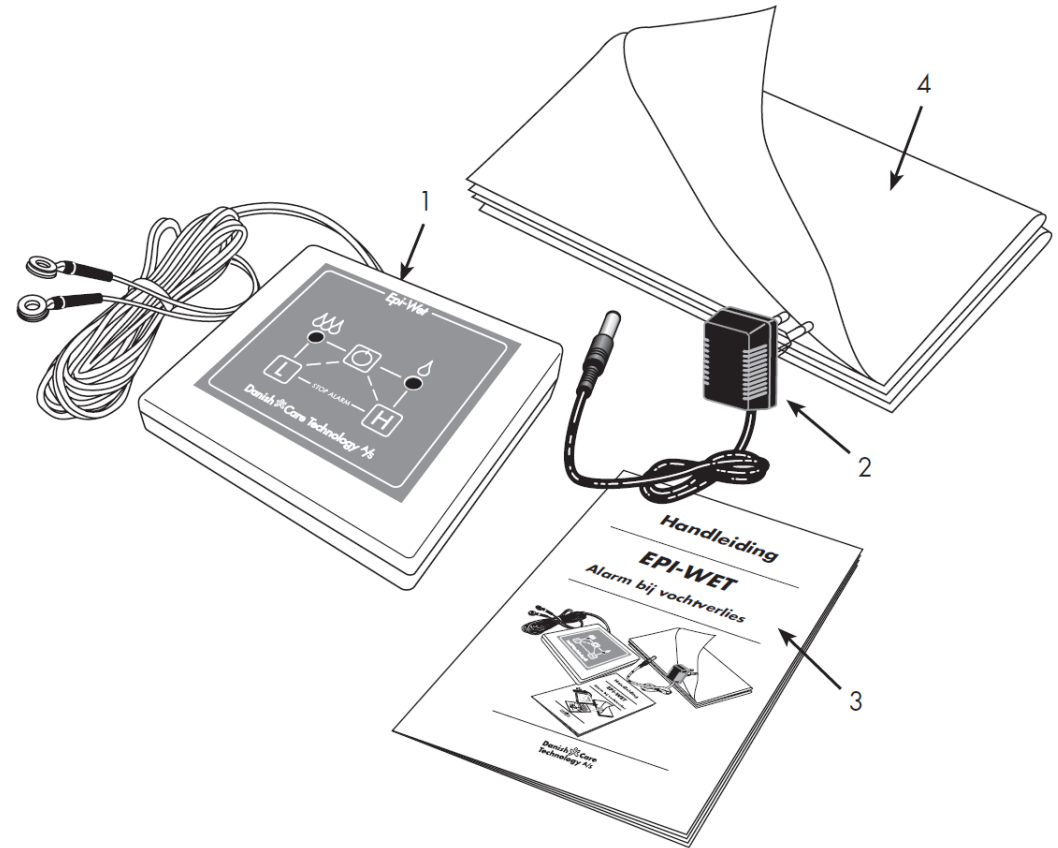


- 1. Epi-Wet vochtalarm
- 2. Voedingsadapter
- 3. Handleiding
- 4. Sensorlaken (niet meegeleverd)

3

Vorbereidingen voor gebruik


Epi-Wet kan vocht registreren dat veroorzaakt wordt door het urineren bij een epileptische aanval. Het apparaat kan onder gunstige omstandigheden ook vochtverlies registreren dat is ontstaan door overgeven tijdens een epileptische aanval of tijdens een bloedtransfusie, nierdialyse, etcetera. Bij de registratie van vochtverlies wordt een alarm geactiveerd, dat het apparaat - bij het gebruik van een oproepapparaat - door kan sturen naar een partner/familieelid of verpleegkundig personeel.

Het sensorlaken wordt met de drukknopjes naar boven toe op het gewone laken aangebracht op de plaats waar vochtverlies wordt verwacht. Steek de eindstukken onder het matras zodat het sensorlaken vastligt. Sluit het snoer aan door de slotjes over de drukknopjes heen te drukken.

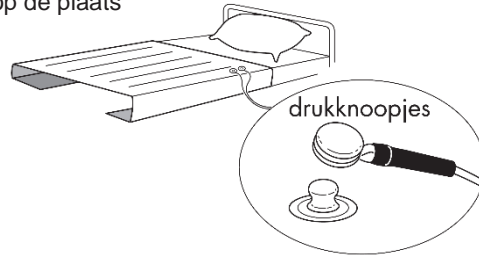

Voor gebruik

Het is van belang dat de epilepsiepatiënt en de partner/familieelid of verpleegkundig personeel vertrouwd raken met het alarm. Test het alarm en het oproepapparaat door de twee drukknopjes van het snoer bij elkaar te houden, waarna er een alarm afgaat. Het geluidssignaal van de Epi-Wet kan ingesteld worden door middel van de volumeknop en kan, indien u dat wenst, eventueel zo ingesteld worden dat er geen geluid afgaat bij een alarm.

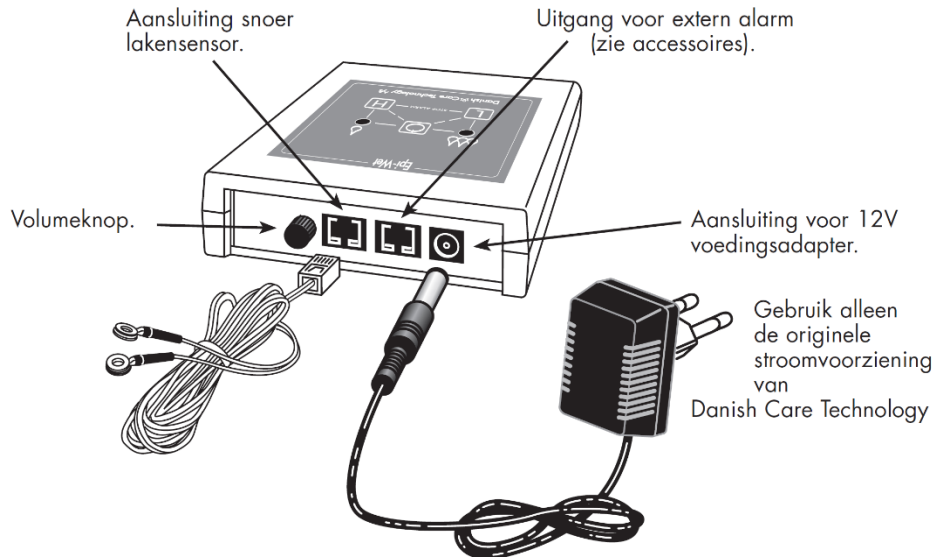


Bediening van het Epi-Wet alarm

Sluit het alarm aan op het sensorlaken door de twee slotjes op de drukknopjes te drukken en het snoer aan te sluiten op het Epi-Wet apparaat. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan en zet het apparaat aan door de knop enkele seconden ingedrukt te houden. Zorg er hierbij voor dat het groene lampje van het apparaat aan staat. Dit is het teken dat de Epi-Wet klaar is voor gebruik. Als u een rood lampje ziet branden, staat het in de alarmmodus.

Instelling van vochtgevoeligheid

Epi-Wet kan ingesteld worden om te reageren op een lage of hoge vochtgevoeligheid. Het alarm reageert bij het kiezen van een lage vochtgevoeligheid pas bij een grote hoeveelheid vocht. Een lage vochtgevoeligheid moet worden gekozen als de gebruiker veel zweet tijdens de slaap. Het gevoeligheidsniveau kan worden ingesteld door de **L**-knop of de **H**-knop ingedrukt te houden terwijl u kort op **ON** drukt.

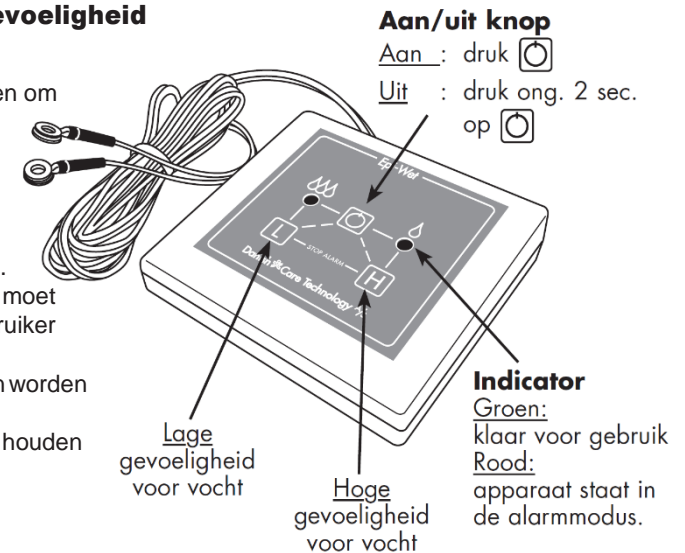

Alarm afzetten:
Druk tegelijkertijd op **L** en **H**

Wasvoorschrift voor het sensorlaken:

Flanel laken: Handwas met handwasmiddel of in de wasmachine zonder wasmiddel op 40°C, mag gestreken worden, niet in de droger of centrifuge.